



**Wave**  
**Wave MV**  
**Wave HV**

## **ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ**

Ідеальний універсальний, текучий, рентгеноконтрастний, світлотвердіючий композитний матеріал, з високим виділенням фтору. Wave наноситься прямо в підготовлену порожнину. Wave проводиться в наступних відтінках: емаль - A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C2, C3, D3, ріжучий край, ясенний, білий; дентин - OA2.

### **СКЛАД WAVE:**

35% від ваги - багатофункціональний метакрилова ефір

65% від ваги - неорганічний наповнювач

### **СКЛАД WAVE MV:**

40% від ваги - багатофункціональний метакрилова ефір

60% від ваги - неорганічний наповнювач

### **СКЛАД WAVE HV:**

34% від ваги - багатофункціональний метакрилова ефір

66% від ваги - неорганічний наповнювач

### **ПРИЗНАЧЕННЯ**

Реставрації V класу, герметизація фісур і порожнин, дрібні реставрації I, II, III, IV класу, рентгеноконтрастні вкладиші порожнини, цервікальні пошкодження / ерозійні руйнування, відколи, фіксація імплантатів, дефекти емалі, дрібні реставрації заглиблень, тимчасові коронки, цементування порцелянових / керамічних / композитних реставрацій, фіксація рухомих зубів, фіксація мостів, реставрація молочних зубів, покриття плям і т.д.

### **ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ**

Ізолуйте і очистіть зуб. Підготуйте порожнину, використовуючи стандартну технологію. Краю каріозної порожнини повинні бути міцними, без пошкоджень емалі і скосів, особливо в тій частині, яка найбільше схильна навантаженні. Якщо все-таки необхідно зробити скоси, вони повинні бути в тій частині зуба, яка не схильна великих навантажень, не повинні перевищувати 1 мм з кутом нахилу не більше 45<sup>0</sup>. Також рекомендується заздалегідь використовувати клини, щоб гарантувати, що реставрається зуб перебуватиме в правильному положенні. Проведіть профілактику всіх поверхонь, які треба протравити, включаючи поверхні, прилеглі до каріозної порожнини, за допомогою пасти, яка не містить масла і фтору або суспензією пемзи і води. Ретельно промийте водою.

### **ВИБІР ВІДТІНКУ:**

Відтінок слід підбирати, коли зуб тільки що очищений і зволожений.

Ізоляція: ізолюйте зуб, щоб запобігти зараженню. Для ізоляції рекомендується використовувати раббер дам.

Захист пульпи: для глибоких порожнин використовуйте підходящу прокладку або цемент.

#### 1. Кислотне протруювання.

Ретельно висушіть поверхню, яку збираєтеся протравити. Кожен зуб покрийте травильним гелем, що містить 37% ортофосфорної кислоти.

(а) Емаль

Протруюють поверхню протягом 20 сек.

(б) Дентин і емаль

Використовуючи техніку «повного протруювання», нанесіть гель на поверхню на 20 сек., Включаючи будь-який склоіномер. Емаль, яка піддається фторування, необхідно протравлювати 90-120 сек.

застереження:

Зверніть увагу, щоб канюля міцно поєднувалася зі шприцом. Використовуйте матричну стрічку для захисту поверхні прилеглих зубів під час протруювання. Під час першого використання або після тривалого зберігання, видавіть невелику кількість гелю на блокнот, щоб перевірити в'язкість.

2. Ретельно змийте водою.

3. Видалить залишки води. Залиште поверхню вологою.

4. Нанесіть адгезив Stae емаль / дентин або інший бонд, відповідно до інструкцій виробника.

5. обережно просушіть протягом 2 сек. Поверхня повинна стати глянцевою.

6. Засвічуйте протягом 20 сек.

7. Нанесіть Wave шаром в 2 мм або менше

7.1 Реставрації V класу

7.2 Підготовка каналів

7.3 Герметизація ямок і фісур

7.4 Маленькі реставрації I, II, III, IV класу

Або інші необхідні призначення.

Попередження: Наносите реставраційний матеріал при нормальній кімнатній температурі (230 C)

8. Засвічуйте Wave мінімум 20 сек. для шару 2 мм.

9. Відполіруйте реставрацію

застереження:

Уникайте тривалого контакту Stae і Wave із шкірою або слизовими оболонками, це може викликати опіки або подразнення.

Якщо у Вас алергія на полімерні матеріали, негайно припиніть використовувати Stae і Wave.

Тримайте далеко від дітей.  
 Чи не заморожувати.  
 Не приймати в усередину.  
 Зберігати при температурі 10-25С.  
 Якщо не використовуєте тривалий час, щільно закручіть кришку.  
 Використовувати при кімнатній температурі.  
 Не використовувати після закінчення терміну придатності.  
 Не піддавати дії прямих сонячних променів.  
 Дата перегляду: 08-2017




Made in Australia by SDI Limited  
 Bayswater, Victoria 3153  
 Australia 1 800 337 003  
 Austria 00800 0225 5734  
 Brazil 0800 770 1735  
 France 00800 0225 5734  
 Germany 0800 1005759  
 Ireland 00800 0225 5734  
 Italy 00800 0225 5734  
 New Zealand 0800 734 034  
 Spain 00800 0225 5734  
 United Kingdom 00800 0225 5734  
 USA & Canada 1 800 228 5166  
 www.sdi.com.au

EC REP

SDI Germany GmbH  
 Hansenstrasse 85  
 51149 Cologne  
 Germany  
 T+49 2203 9255 0

PAK41094 F

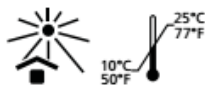

Last Revised: 08-2017

|   |  |
|---|--|
| <br><b>UA.TR.116</b> | Матеріал стоматологічний для пломбування зубів<br>WAVE   |
|   |  SDI Limited<br>3-15 Brunsdon Street, Bayswater, Victoria 3153, Australia<br>Виробник:<br>СсДіАй Лімітед<br>3-15 Брансдон Стріт, Байсвотер, Вікторія, 3153,<br>Австралія |
|   | Уповноважений представник в Україні:<br>ТОВ Фірма «РЕГАРД»<br>Юридична адреса: 61068, м. Харків, Україна, вул.<br>Семиградська 12 А<br>Тел.: +38(057)-703-23-42, +38(057)-703-23-25,<br>Тел./Факс: +38(057)-738-09-53<br>email: office@regard.com.ua       |